


## Цифровые слайд-сканеры для гистологии и цитологии в ветеринарии



## Vision A1

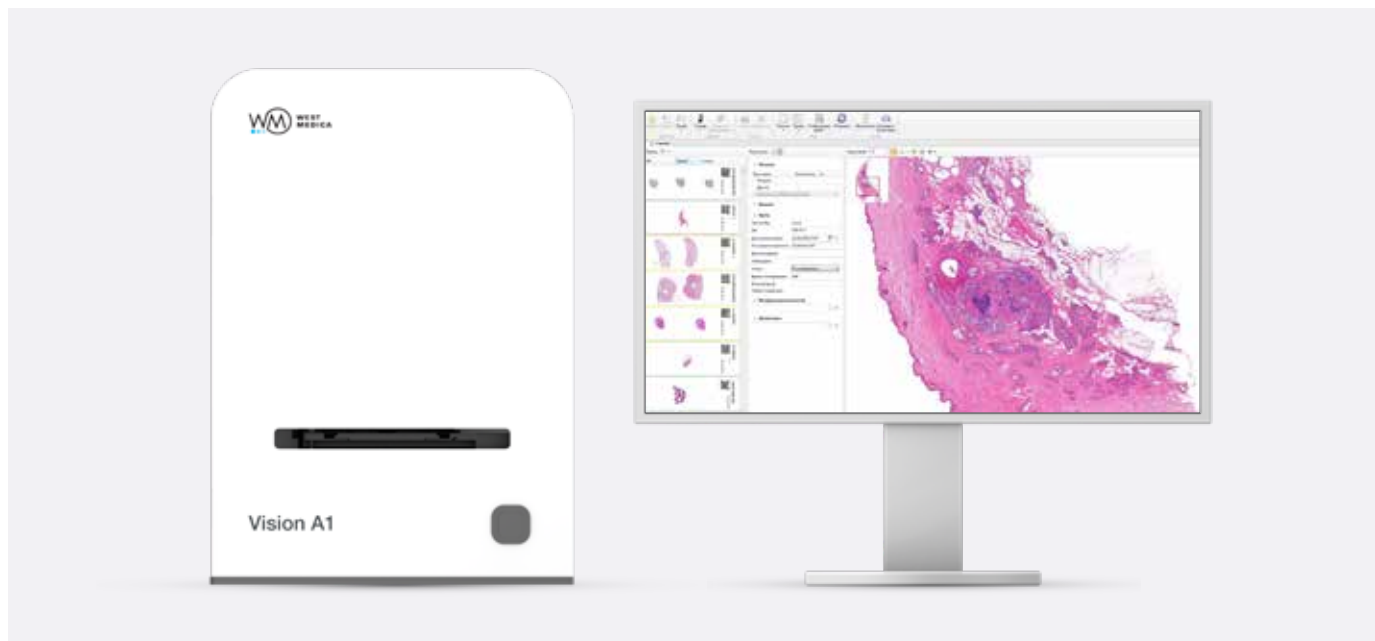

### Основные характеристики

- Загрузка 1 слайда
- Автоматическое сканирование образцов
- Для небольших и средних лабораторий

### Этапы сканирования




01

Поместите слайд в держатель



02


Установите держатель в сканер  
и запустите сканирование слайдов

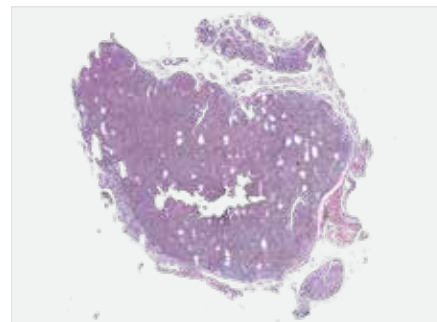

03

Получите результат

## Vision Assist

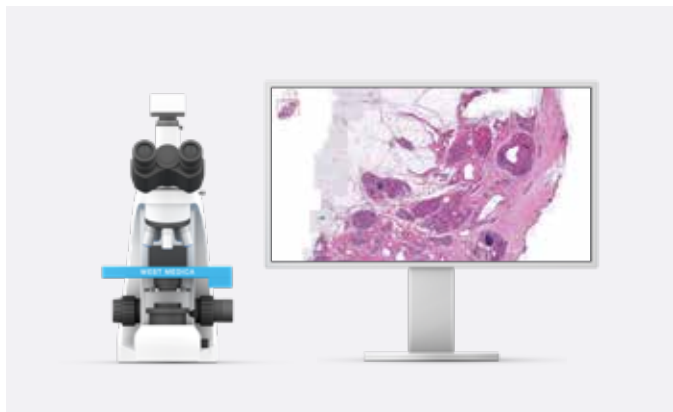

- Загрузка 1 или 4 слайдов
- Автоматическое сканирование образцов
- Для небольших и средних лабораторий

## Vision Pro



- Загрузка 4 или 8 слайдов
- Автоматическое сканирование образцов
- Произвольный доступ
- Для средних и крупных лабораторий


## Vision Ultimate



- Загрузка до 120 или 200 слайдов
- Автоматическое сканирование образцов
- Высокая скорость сканирования и захват изображения всего препарата
- Произвольный доступ и тестирование срочных проб
- Работа в ночную смену без оператора
- Для централизованных и крупных лабораторий

## Vision Slide Vet

### Цифровая цитология и гистопатология

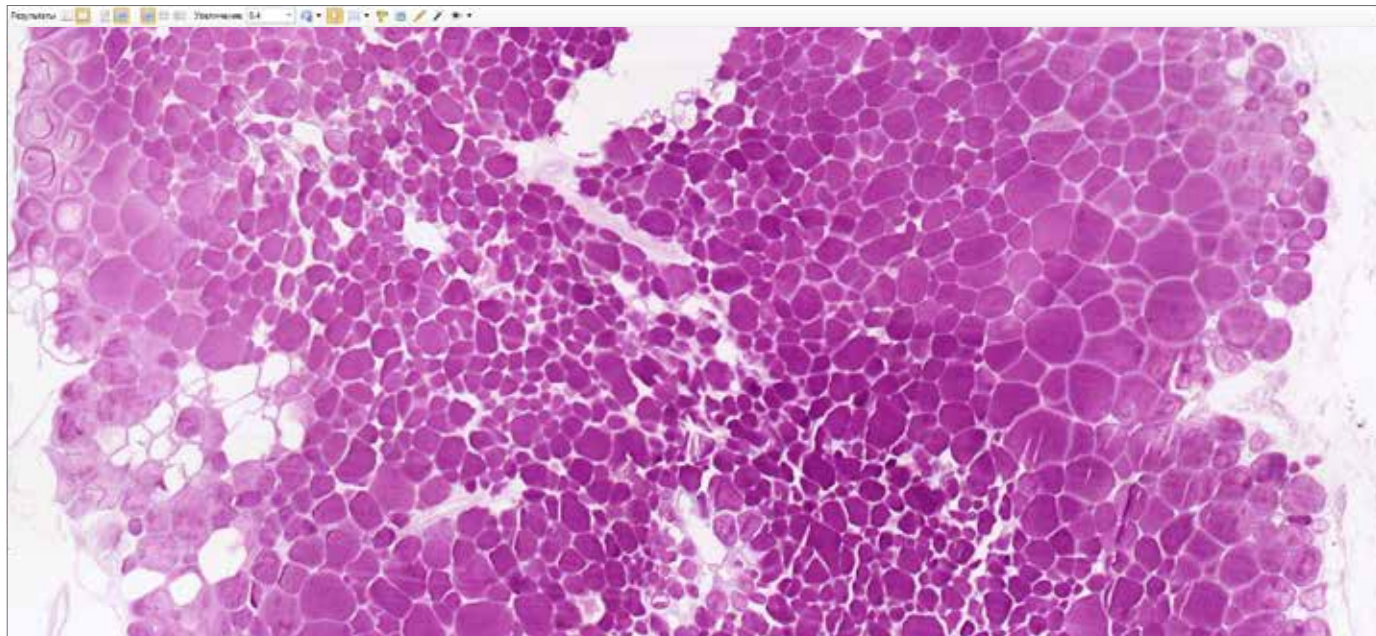

### Удобная работа с цифровыми препаратами


**Vision Slide Vet** обеспечивает быстрый доступ к высококачественным цифровым препаратам для гистопатологии и цитологии в ветеринарии. Специалисты могут легко редактировать изображения: поворачивать, выделять интересные области и изменять масштаб, что значительно упрощает процесс анализа и диагностики.

### Возможности Vision Slide Vet

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Тип пробы:           | Гисто            |
| ИН:                  | 32               |
| Дата взятия пробы:   | 14.05.2018 11:59 |
| Последнее изменение: | 07.03.2023 13:24 |
| Дата валидации:      | 25.09.2018 12:24 |
| Утверждено:          | Нема-РС\Нема     |
| Ответственные:       |                  |
| Статус:              | Выполнена        |
| Время сканирования:  | 01:11            |

#### Информация о пробе

Настраиваемый электронный бланк

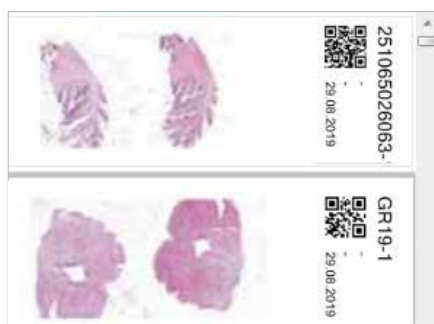

#### База данных


База данных для хранения цифровых препаратов



#### Отчет

Подготовка отчетных документов




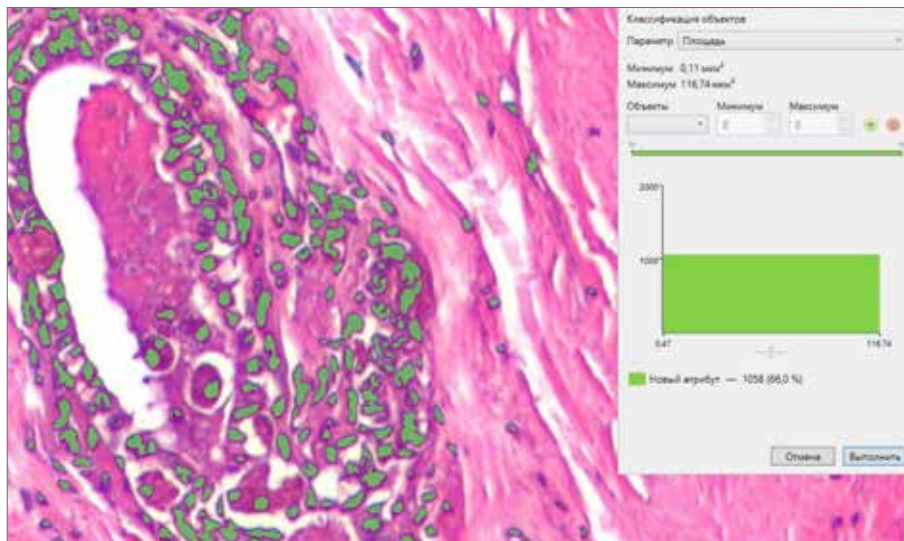


## Идентификация и классификация объектов

Выделение объектов цветом для анализа. Поиск и классификация объектов анализа по необходимым критериям. Идентификация и классификация объектов на изображении. Измерение линейных и оптических параметров.


## Цифровые препараты животных

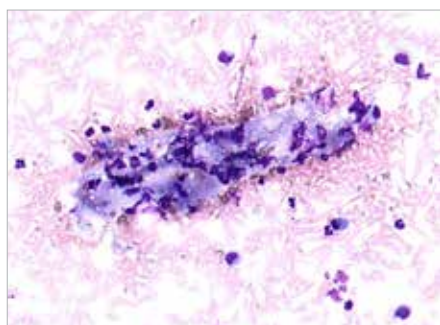

Выпотная жидкость собаки

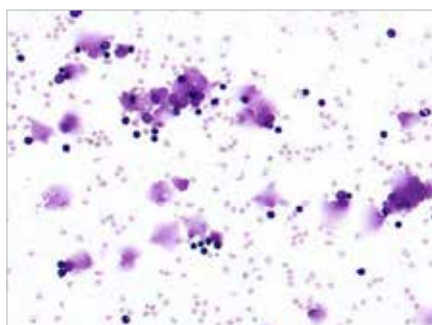


Выпотная жидкость коровы

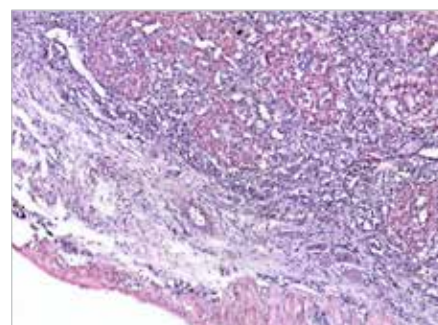

Надпочечник кошки



## Vision Remote

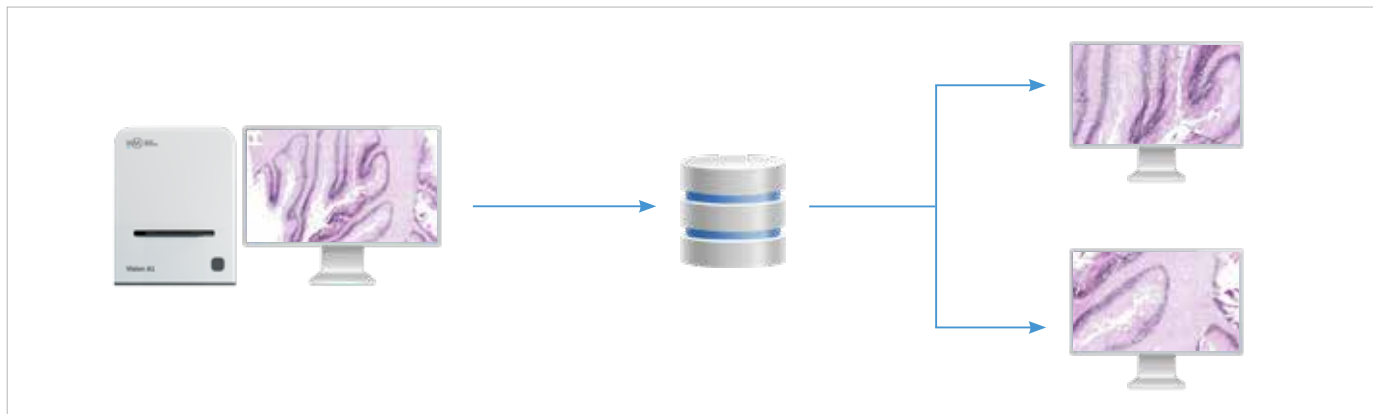

[www.wm-vision.ru](http://www.wm-vision.ru)

Удаленное рабочее место

## Vision Suite



[www.vision-suite.ru](http://www.vision-suite.ru)

Удаленная работа с ПО Vision  
через интернет-браузер

## Vision Expertise



[www.vision-expertise.ru](http://www.vision-expertise.ru)


Онлайн-тестирование и проверка знаний  
специалистов в микроскопии

## Искусственный интеллект для цифровой микроскопии



Благодаря технологиям искусственного интеллекта решения Vision для цифровой микроскопии оптимизируют и стандартизируют рабочий процесс лаборатории.

# Pathoview

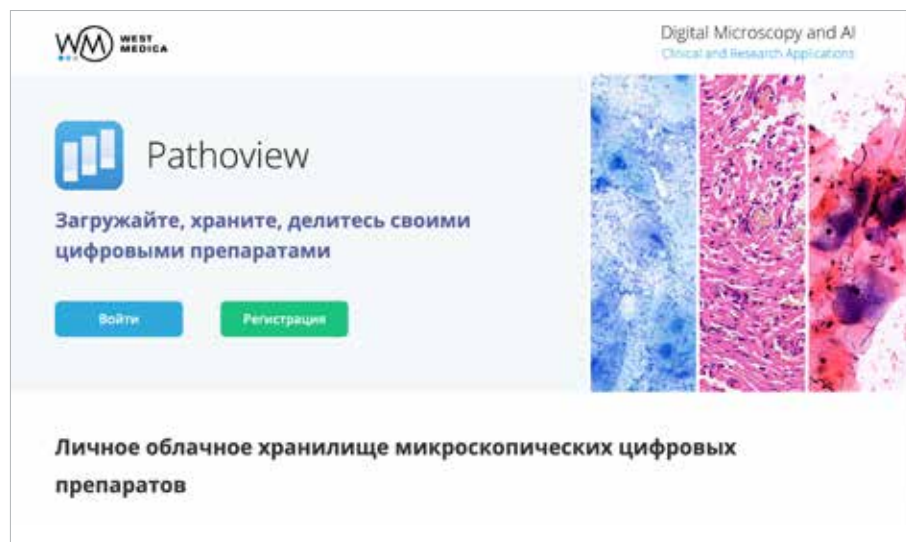

[www.pathoview.ru](http://www.pathoview.ru)

**Работа с цифровыми препаратами через интернет-браузер**

Загрузка, просмотр, хранение и обмен цифровыми препаратами



## Загрузка

Загружайте свои препараты любым удобным для вас способом: через браузер, из приложений Vision и Vision Slide Viewer или отправляйте из организации Vision Suite.



## Хранение

Сохраняйте цифровые препараты в Pathoview, и они всегда будут у вас под рукой, где бы вы ни находились. Обеспечьте доступ к цифровым препаратам с любого устройства.



## Общий доступ


Обмен информацией — делитесь и консультируйтесь своими препаратами с коллегами. Быстро и удобно отправляйте ссылки на препараты любого размера.



## Цифровые препараты

Поддержка различных форматов цифровых препаратов: .mrxs, .svs, .tiff, .ndpi, .dcm.

## Интеграция Vision и Pathoview

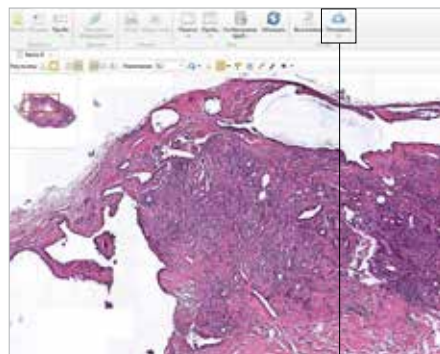

В Vision выберите пробу и нажмите «Отправить» на панели инструментов



В Pathoview нажмите «Поделиться», скопируйте ссылку и отправьте на консультацию коллегам



Ваш коллега просматривает цифровой препарат на любом устройстве

# Автоматические сканирующие системы

| Основные характеристики            | Vision A1                                              | Vision Assist                                          | Vision Pro                                             | Vision Ultimate                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Модули для клинического применения | Vision Slide Vet                                       | Vision Slide Vet                                       | Vision Slide Vet                                       | Vision Slide Vet                                                               |
| Режим работы                       | Последовательная загрузка                              | Очередь (только для 4 слайдов)                         | Очередь, произвольный доступ                           | Очередь, непрерывный и произвольный доступ, срочная проба, 24/7                |
| Сканирование                       | Автоматическое                                         | Автоматическое                                         | Автоматическое                                         | Автоматическое                                                                 |
| Загрузка слайда                    | 1 слайд                                                | 1 или 4 слайда                                         | 4 или 8 слайдов                                        | 120 или 200 слайдов                                                            |
| Компоненты системы                 | Сканирующий блок<br>Рабочая станция<br>Монитор         | Сканирующий микроскоп<br>Рабочая станция<br>Монитор    | Сканирующий микроскоп<br>Рабочая станция<br>Монитор    | Сканирующий микроскоп<br>Рабочая станция<br>Монитор<br>Управляющий тач-монитор |
| Объективы                          | 20x                                                    | 20x                                                    | 20x                                                    | 2,5x, 10x, 20x                                                                 |
| Метод исследования                 | Светлое поле                                           | Светлое поле                                           | Светлое поле                                           | Светлое поле                                                                   |
| Освещение                          | По Келлеру, LED                                        | По Келлеру, LED                                        | По Келлеру, LED                                        | По Келлеру, LED                                                                |
| Коммуникации                       | Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7 | Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7 | Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7 | Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7                         |



Проверьте целевое использование и наличие регистрации в законодательстве вашего региона.  
В зависимости от правил определенного региона, некоторые продукты могут использоваться только в исследовательских целях.  
Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH  
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1  
2351 Wiener Neudorf, Austria  
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464  
vienna@westmedica.com, www.wm-vision.com

Официальный дистрибьютер в России:  
ООО «Медика Продакт»  
ул. Шереметьевская, 85, стр. 5, Москва, 129075  
тел.: +7 (495) 787-44-01, факс: +7 (495) 787-44-01  
vision@medicaprodukt.ru, www.wm-vision.ru